

**Entregue-se a
alta performance
em soluções estéticas
odontológicas.**



DSP
white

 Catálogo de Produtos 2025



Para a DSPWhite
liberdade
é se surpreender
com novas escolhas.





Know How da DSP Biomedical

**Empresa
consolidada
a mais de
20 anos no
mercado
odontológico
nacional e
internacional.**

A DSP White nasceu em 2019 com a missão de ser disruptiva e trazer ao mercado novas possibilidades baseadas na paixão por melhorar a saúde bucal e proporcionar qualidade de vida para as pessoas. É liberdade para os nossos clientes e para os clientes dos dentistas.

A DSP White já se apresenta ao mercado com a base de mais de 20 anos de atuação da DSP Biomedical, produtora da mais completa linha de produtos para procedimentos de odontologia, cirurgia bucomaxilofacial e implantodontia do mercado nacional.

Com a DSP White, a DSP Biomedical dá um importante passo, tornando-se um grupo, a DSP Biomedical Group. A seguir, conheça o nosso portfólio de produtos para dentística.

DSP White Clinic

Clareamento dental de consultório conforme sua necessidade.



Peróxido de hidrogênio 35%
Indicado para dentes vitais e não vitais.

- ***Manipulação da quantidade desejada** – apresentação em 2 frascos (peróxido e espessante).
- ***pH neutro e estável durante todo o procedimento** – baixo índice de sensibilidade.
- ***Viscosidade ideal** - Não escorre.
- ***Acompanha barreira gengival.**



Kit	Mini Kit
 1 seringa de DSP Dam com 2g.	 1 seringa de DSP Dam com 1g.
 • 1 Peróxido de Hidrogênio com 15g. • 1 Espessante com 5g. • 1 Neutralizante de Peróxido com 10g.	 • 1 Peróxido de Hidrogênio com 5g. • 1 Espessante com 2g. • 1 Neutralizante de Peróxido com 10g.
 1 ponteira aplicadora	 1 ponteira aplicadora
 1 espátula	 1 espátula
 1 leito de mistura	 1 leito de mistura

DSP White Clinic 35% Calcium

Tecnologia de ponta para clareamento dental de uso em consultório.

- Peróxido de hidrogênio 35% - Para dentes vitais e não vitais.
- ***Seringas pré-dosadas e acopláveis** - Aplicação rápida | Segura | Previsível
- ***Com cálcio** - Minimiza os efeitos da desmineralização
- ***pH estável** - Redução de sensibilidade



Kit	Mini Kit
 • 6 seringas de Espessante • 6 seringas de Peróxido de Hidrogênio • 1 seringa DSP Dam com 2g.	• 1 seringa de espessante, • 1 seringa de peróxido de hidrogênio • 1 seringa DSP Dam 1g.
 6 conectores de seringas	 1 conector de seringa
 ponteiros aplicadoras	 ponteiros aplicadoras
 1 frasco de Neutralizante de peróxido	

DSP White Personal



Excelência em clareamento dental de autoaplicação.

- * **Baixo índice de sensibilidade**, pH neutro e contém agentes dessensibilizantes e remineralizantes.
- * **Alto poder humectante**, Evita a desmineralização.
- * **Viscosidade ideal** – fácil de aplicar e utilizar sem extravasar da moldeira.



Kit	Flow Pack	Single
5 seringas de 3g	3 seringas de 3g	1 seringa de 3g
2 placas de EVA com 1mm de espessura.		
1 estojo para moldeira		
ponteiros aplicadoras	ponteiros aplicadoras	ponteiros aplicadoras

DSP White Endo Perborate



Clareador endodôntico à base de peróxido de hidrogênio a 20%

*Você manipula a quantidade certa – Apresentação em 2 fracos: Peroxido de hidrogênio e Perborato de sódio.

• 1 Perborato de sódio com 10g.	• 1 Peróxido de Hidrogênio 20% com 10g.
1 medidor de pó	1 placa para mistura.

Clareamento dental

DSP White Endo Gel 35%

Sistema de clareamento à base de Peróxido de Carbamida 35% para uso profissional.

indicado para o clareamento de dentes não vitalizados.



2 seringas de 1,5g
ponteiros aplicadoras

Force Post Pinos de Fibra de Vidro

Pino de fibra de vidro intrarradicular de alta resistência na medida certa.

***Translúcido** – alta capacidade estética.

***Excelente condutividade de luz** – ajuda na fotopolimerização.

* **(Brocas)** Alta durabilidade

* **(Brocas)** Excelente capacidade de corte.

Pinos de fibra de vidro



ASPECTO
TRANSLÚCIDO
Alta capacidade
estética.



CONDUTIVIDADE
DA LUZ



KIT COMPLETO,
ESPECIAL E
INTRODUTÓRIO
Acompanham
5 pinos para
cada broca.



ALTA
DURABILIDADE

ALTA
CAPACIDADE
DE CORTE

KIT COMPLETO ForcePost DC

Contém 5 pinos de cada tamanho (DC0.5, DC1, DC2, DC3 e DC2L) com suas respectivas brocas (25 pinos e 5 brocas).

KIT ESPECIAL ForcePost DC e DCL

Contém 5 pinos de cada tamanho (DC0.5, DC0.5L, DC1, DC1L e DC2L) com suas respectivas brocas (25 pinos e 5 brocas).

KIT INTRODUTÓRIO ForcePost DC ou DCL

Contém 5 pinos ForcePost de um determinado tamanho e sua respectiva Broca.

REFIL ForcePost DC ou DCL

Contém 05 pinos ForcePost de um determinado tamanho.

DSP Etch

Condicionador ácido smart à base de ácido fosfórico 37%.

***Tecnologia Autolimitante** – ataque ácido somente sobre o esmalte, mesmo que exceda o tempo preconizado.

***Hidrofílico** – rápida e eficaz remoção ao ser lavado.



3 seringas de 3g
ponteiros aplicadoras

DSP Porcelain Etch

Condicionador ácido para porcelanas à base de ácido fluorídrico 5% ou 10%.

***Maior adesão dos materiais resinosos.**
***Fácil remoção, alta afinidade com a água.**



1 seringa de 3g
ponteiros aplicadoras

DSP Silane

Indicado para promover a união química entre materiais orgânicos, adesivos contendo monômeros metacrílicos e materiais em cerâmica, cerômero, resinas compostas e pinos de fibra de vidro.



Silano

DSP Eucalipto1

Solvente para remoção de cones de guta-percha.

***Menos tempo para remoção do material obturador.**

1 frasco de 10ml



Solvente de Gutta Percha

SOF Tray Eva

Placas para modelar no formato quadrado, (135 x 135mm), indicadas para confecção de moldes para clareamento dental.



embalem com 2, 5 ou 10 placas de EVA com 1mm de espessura.

DSP Dam

Barreira Gingival



- * Barreira gengival fotopolimerizável de alta performance.
- * Fácil de aplicar e remover.
- * Excelente viscosidade, não escorre.
- * Cores vibrantes.
- Possui grande poder de vedação.
- Alta resistência mecânica.
- Resina fotopolimerizável de viscosidade tixotrópica que permite fácil e perfeita cobertura dos tecidos moles, sem escorrer para regiões indesejadas.
- Não solta da gengiva: quando pressionado para ser removido, desprende-se por inteiro.
- Não causa irritação nos tecidos gengivais.



1 seringa de 2g



ponteiras aplicadoras

DSP Diamond Polishing

Utilizado em conjunto com discos de feltro ou discos aveludados, o que potencializa sua ação no polimento e acabamento em superfícies de materiais restauradores em geral.

DSP Diamond Polishing oferece excelente resultado no polimento e brilho de porcelana, esmalte dental, resinas, compósitos e outros materiais restauradores. É a pasta de polimento universal.

***Solúvel em água – Minimiza a geração de calor e fácil remoção.**

- Acabamento e polimento em superfícies de materiais restauradores em geral.
- Viscosidade média e não é suscetível à ação do calor.
- Solúvel em água. Proporciona facilidade na lubrificação durante o processo de polimento (minimiza a geração de calor durante o procedimento) e facilita sua remoção ao final do tratamento.

Pasta de Polimento



1 seringa de 2g



ponteiras aplicadoras

DSP Polishing Past Al Restoration

Pasta de polimento à base de óxido de alumínio para polimento de materiais restauradores.

1 seringa de 4g
ponteiros aplicadoras



DSP Polishing Past Al One & Two

Pasta para potencialização de acabamento e pré polimento de resinas e outros materiais restauradores.

***Baixa geração de calor e fácil de remover – solúvel e água.**

2 seringas de 4g
ponteiros aplicadoras



DSP Desensitizer

DSP Desensitizer é indicado no tratamento de dentes com sensibilidades moderada a baixa e foi desenvolvido para aliviar sensibilidade dental desencadeada por agentes térmicos e químicos. Também é indicado no tratamento de sensibilidade que pode ser causada pelo tratamento do clareamento dental.

***Dupla ação dessensibilizante**
Nitrato de potássio e fluoreto de sódio.

Desensibilizantes




1 seringa de 3g
ponteiros aplicadoras

Devolva aos seus pacientes o prazer de saborear as coisas boas da vida com o DSP Gluhem Desensitizer.



1 frasco de 5ml

A hipersensibilidade dentinária cervical tem acometido cada vez mais pessoas, especialmente em razão da maior longevidade da população com dentes vitais, ou com restaurações satisfatórias, e pelos hábitos alimentares majoritariamente ácidos, de jovens adultos¹. Por se tratar de um dos efeitos mais indesejados entre os pacientes, Gluhem Desensitizer busca eliminar a desagradável dor aguda, que limita seus pacientes na ingestão de alimentos doces ou azedos, quentes ou frios.

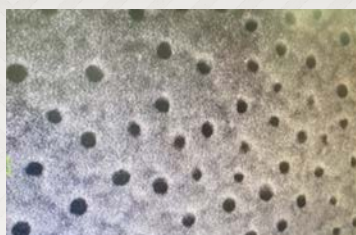

**Sem DSP Gluhem,
túbulos abertos**

MEV – Prof.^a Larissa Cavalcante



**Com DSP Gluhem,
túbulos obliterados**

MEV – Prof.^a Larissa Cavalcante



**DSP Gluhem solução, corte
transversal túbulos obliterados**

MEV – Prof.^a Larissa Cavalcante

Gluhem Desensitizer é um hiperdessensibilizante químico, de aplicação simples e efetiva, para tratamento dos sintomas dolorosos da hipersensibilidade dentinária cervical (HDC).

Com formulação baseada na combinação de glutaraldeído e metacrilato de hidroxietil (HEMA), Gluhem Desensitizer penetra nos túbulos dentinários expostos, promovendo a obliteração que evitam movimentos de fluidos intertubulares em função de alterações osmóticas.



1 seringa de 3g
ponteiros aplicadoras

Benefícios

- . Redução e/ou cessão da HDC nas regiões cervicais expostas que não necessitam de restauração.
- . Alívio ou prevenção da HDC pós preparo de dentes que receberão restaurações diretos ou indiretas.

01 | Redução e até mesmo extinção da dor.

02 | RESULTADOS IMEDIATOS

03 | FÁCIL APLICAÇÃO | Etapa Única

04 | **Compatibilidade Universal** com todos os materiais adesivos e restauradores

A harmonia do sorriso agora tem nome, DSPChroma.

Resina composta nano-híbrida com Nano Silicato de Zircônio



DSPChroma é a resina composta nano-híbrida fotopolimerizável da DSP White, indicada para restaurações de todas as classes em dentes anteriores e posteriores pelo sistema incremental.

Sua gama de cores e variações de opacidades foram desenvolvidas e fundamentadas na mais alta tecnologia de mimetização para a estética dentária, permitindo êxito na técnica de estratificação, provendo o máximo desempenho estético e capacidade de mimetismo dos dentes naturais.


Nano-híbrida

Possui alto desempenho, como o vidro de Bário-Alumino na faixa de 0,7 μm , nanopartículas de Sílicas na faixa de 35 nm e principalmente Nano Silicato de Zircônio na faixa de 100 nm, que maximizam a resistência ao desgaste.

A distribuição uniforme das partículas de 35 nm a 1,0 μm , contribuem para elevadas propriedades mecânicas, excelente manuseio, alta estética e especialmente brilho no polimento.

Resistência


Propriedades físicas e mecânicas elevadas proporcionando alta resistência, restaurações duradouras com os melhores resultados estéticos possíveis.

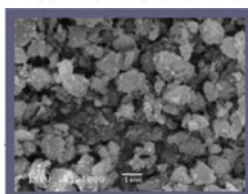

Fotomicrografia em Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) da combinação de partículas da resina. DSPChroma apresenta uniformidade e não apresenta partículas discrepantes (grandes). Aumento de 10.000 vezes. Imagem gentilmente cedida pela FOP-Unicamp

Brilho e polimento

O formato esferoidal, o tamanho de 100 nanômetros e o percentual adicionado da carga de Nano Silicato de Zircônio, traz para o compósito restaurador o poder de alto brilho e lisura superficial que é visualmente próximo a de uma cerâmica feldspática e com retenção prolongada do polimento.

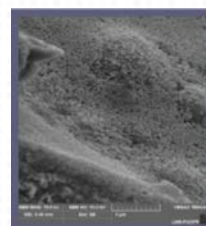

Fotomicrografia em Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) das partículas esferoidais do compósito restaurador DSPChroma. Aumento de 10.000 vezes. Imagem gentilmente cedida pela PUCPR



A resina DSPChroma está disponível em 25 cores.

Sistema de cores

DSPChroma

DSPwhite

Esmalte

EA1

EA2

EA3

EA3.5

EA4

EB1

EB2

Dentina

DA1

DA2

DA3

DA3.5

DA4

DB1

DB2

Dentes
Clareados

WE

XWE

WD

XWD

Efeito

CLEAR

OPAQUE

PINK OPAQUER

OPASLESCENT

Bleach

BL1

BL2

BL3

Eleve o tempo de vida útil da adesão com a linha StickBond da DSP White.

Sistema adesivo autocondicionante para esmalte e dentina

STICKBOND



Forma de
apresentação
1 frasco de 5ml,
nas modalidades
Universal e
Convencional.

aumento na
resistência
adesiva

remineralização
do esmalte
e da dentina

maior tempo
de vida útil
da adesão

risco mínimo
de sensibilidade
pós operatória

 **DSP**white

UNIVERSAL STICK BOND



StickBond Universal é um adesivo odontológico universal, fotopolimerizável, monocomponente e autocondicionante de frasco único (8ª geração), responsável pela união entre a estrutura dental (esmalte e dentina) e materiais restauradores.

O condicionamento ácido, primer e o adesivo estão combinados em um frasco único.

O uso prévio de agente condicionante é opcional em ambos esmalte e dentina, portanto, o adesivo pode ser utilizado de três modos: autocondicionante, seletivo em esmalte ou condicionamento total (esmalte e dentina).

O **StickBond Universal** contém os principais **monômeros adesivos, como MDP**, possui sistema foto ativado por luz azul no comprimento de onda de 400 a 500 nm e é incorporado por nano sílicas e biovidro. Essas cargas quando incorporado ao **StickBond Universal**, **promove um aumento na resistência adesiva, remineralização do esmalte e da dentina, elevando o tempo de vida útil da adesão**, além de dificultar a desmineralização e o processo carioso e risco mínimo de sensibilidade pós operatória. **O produto é BPA Free, ou seja, é livre de monômeros que contenham Bisfenol A.**



StickBond também é disponível na versão adesivo odontológico convencional, fotopolimerizável e monocomponente de dois passos, de 5ª geração (condicionamento ácido total).

Indicações

- Todas as classes de restaurações diretas com compósitos (classe I, II, III, IV e V);
- Cimentação adesiva (em conjunto com cimento resinoso) de peças protéticas (pinos intracanaís/ núcleos, coroas, onlays/inlays, facetas, etc.) em fibra de vidro, compômero, cerâmica, resina e metal;
- Reparos adesivos em cerâmica e compósitos;
- Selamento de cavidades previamente à restauração com amálgama;
- Selamento de cavidades e remanescentes dentais, antes da cimentação provisória de restaurações indiretas;
- Adesão de selantes de fósulas e fissuras;
- Verniz de proteção para restaurações em ionômero de vidro;
- Adesão de cimentos de dupla polimerização (duais) e materiais de construção de núcleos de preenchimento, com os quais seja compatível;
- Dessensibilização de raízes expostas (áreas de retração/ recessão gengival);
- Adesão de núcleos de preenchimento, construídos em compósitos fotopolimerizáveis ou materiais de construção de núcleos de preenchimento.
- Uso como primer para metais ou cerâmicas.

StickBond Universal contém MDP, que permite uso como primer de metais ou cerâmicas.

FÁBRICA - BRASIL

Rua Marechal Floriano Peixoto, 303
Ouro Verde II, Campo Largo - PR
CEP 83.606-290

VENDAS

+55 41 3291 2200 | 0800 600 8866
comercial@dspbiomedical.com.br
41 99909-0272

COMPRE ON-LINE

WWW.LOJADSP.COM.BR

 **dspwhiteoficial**

UNIDADE EUROPA

Alameda dos Oceanos
142 Piso O Fracção H, Edifício
Pertejo, Parque das Nações
1990-502 Lisboa

VENDAS

+ 351 211 550 028
+351 210 126 255
internacional@dspbiomedical.com

UNIDADE PERU

Av. José Pardo, 1167 Of 201
Urba. Santa Cruz - Miraflores-Lima

VENDAS

+ 51 01 15409667
comercial1@dspbiomedical.pe

DSP
white

DSP White é a linha de estética dental e dentística da DSP Biomedical Group.

DSP
Biomedical
Group